



Der original

100% Made in Germany

LIGAMED® Fersenschuh

CE Art.-Nr. 32210-001 PZN 46781543 Hilfsmittel-Positionsnummer 11.11.05.021

Schützen ohne Schwitzen, besser geht's nicht:

- federleicht - luftig - komfortabel
- simple, schnelle Handhabung
- anatomisch korrekt für alle Füße
- hygienisch, schmutzabweisend
- kochfest, sterilisierbar
- wiederverwendbar
- wartungsfrei

Ein echter Zeit- und Kostensparer!





Der original


100% Made in Germany

LIGAMED® Fersenschuh

CE Art.-Nr. 32210-001 PZN 46781543 Hilfsmittel-Positionsnummer 11.11.05.021



Das Innenleben besteht aus dem in der Medizin international bewährten Verbandstoff **LIGASANO® grün**, der Bezug aus hochfestem Polyester-Gittergewebe. Die Größe des Fersenschuhs beträgt LxBxH 27,5 x 9 x 18 cm.

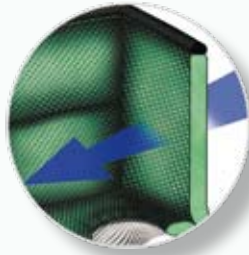

Der original **LIGAMED® Fersenschuh** ist vollkommen luftdurchlässig und federleicht. Wärme- bzw. Feuchtestau haben keine Chance, man spürt kaum, dass man ihn trägt.



Die dreidimensionale Polsterung ist anatomisch korrekt. Das Ergebnis ist optimaler Schutz, keine Druckstellen, perfekte Passform (auch bei Anomalien) und hoher Tragekomfort bei fast jeder Fußgröße und Fußform.



Das Anlegen des Fersenschuhs geht einfach und schnell. Die Fixierung erfolgt sekundenschnell mit zwei extra langen Klettverschlüssen und kann nach Belieben eingestellt werden.

Der original LIGAMED® Fersenschuh - Sicherer Rundumschutz für jeden Fuß

Anwendungsorte	Anwendungsgebiete	Schutzfunktionen	Komfort	Hygiene
<ul style="list-style-type: none"> • Klinik und Pflege • OP-Tisch • Untersuchungsliege • Intensivpflege • Pflegeheime • Pflegedienste • Allgemeine Pflege • Bett, Rollstuhl, etc. • Krankentransport • Zuhause • Dauertemperaturbeständigkeit von -20 °C bis +60 °C 	<ul style="list-style-type: none"> • Fixierung von Wundauflagen • Wundbegleitbehandlung • Prävention • Fersendekubitus • Knöchel • ideal auch für Diabetiker • keine Anwendungsrisiken und Kontraindikationen bekannt 	<ul style="list-style-type: none"> • Druck- und Stoßschutz für den ganzen Fuß im Liegen und Sitzen • Vorbeugung gegen Pilzinfektionen und feuchte Füße • kein Wärmestau • reduziert Scherkräfte 	<ul style="list-style-type: none"> • vollkommen luftdurchlässig • kein Wärmestau • kein Feuchtestau • federleicht • anatomisch geformt • passend für kleine und große Füße • hoher Tragekomfort • wartungsfrei 	<ul style="list-style-type: none"> • schmutzabweisend, sehr schnell trocknend • waschbar bis 95 °C mit haushaltsüblichen Waschmitteln • Desinfektion durch Kochwaschgang • sterilisierbar mit Wasserdampf, 4 Min. bei 134 °C • desinfizierbar mit haushaltsüblichen, alkohol- und chlorfreien Desinfektionsmitteln • kein Nährboden für Pilze und Bakterien



Anwendertipp: Der LIGAMED® Fersenschuh und LIGASANO® weiß in 1cm Dicke sind eine ideale Kombination. So nutzen Sie die therapeutische Wirkung von LIGASANO® weiß und der Fersenschuh bleibt länger sauber. Das spart Zeit und Geld.